

CuroCell® 4 AD




**Miellyttävä, vaihtuvapaineinen patja
automaattisella pumpulla**

CuroCell® 4 AD

CuroCell® 4 AD-patjaa käytetään painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon riskiluokissa 1- 4⁽¹⁾. Se on erittäin toiminnallinen ja miellyttävä, kustannustehokas patjajärjestelmä ja soveltuu ihanteellisesti kaikkiin terveydenhuollon ympäristöihin.

Kantapääkevennys tarjoaa entistä suurempaa suojaa vähentämällä kantapäihin kohdistuvaa painetta.

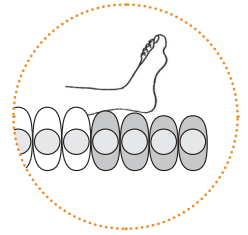

Care of Sweden-patjoihin on saatavana joustava hygieniapäällinen, joka täyttää terveydenhuollon vaatimukset laadun, hygienian⁽²⁾ ja turvallisuuden suhteen. Kaikki päälliset valmistetaan uudenaikaisista kierrätettävistä materiaaleista ja ne ovat hengittäviä⁽³⁾, mikä vähentää maseraation riskiä.

Tekniset tiedot

Type: Vaihtuvapaineinen patja
Korkeus: 21 cm
Toiminta: Painehaavojen ehkäisy ja hoito mukaan lukien luokka 4⁽¹⁾
Suositeltu käyttäjän paino: 0-200 kg
Virta: 230 V/50 Hz
Pumpun äänen taso: 21 dBA
Takuu: 2 vuotta
Päällisen puhdistus: Pyyhi puhdistus- tai desinfiointiaineella. Konepesu max 95 °C, rumpukuivaus.



Ominaisuudet

- CPR toiminto-nopea tyhjennys
- Digitaalinen pumppu, jossa sisäänrakennettu sensori
- Helppo käsitellä
- Kahva siirtämiseen ja kuljetukseen
- Vaihdettavat polyuretaanikennot, joissa kenno kennossa-järjestelmä
- Hiljainen ja energiaa säästävä toiminta
- Pehmeä, joustava, hengittävä⁽³⁾ hygieniapäällinen
- Ääni ja valo varoittavat liian matalasta paineesta
- Ääni ja valo varoittavat virtaviasta
- Automaattinen palautus
- Kuljetustoiminto
- Helppo puhdistaa

Koot

80/85/90/105/120x200 cm ja 80/85/90x210 cm.
Mikäli tarvitset muita kokoja, ota yhteys toimittajaasi.

Lisävarusteet

- Johdon pidike
- Miellyttävä kangas
- Kestävä kantokassi
- Hygieniapäällinen, jossa hitsatut saumat
- Matalakitkainen päällinen
- Lakanan pidin
- Ilmastoidut kennot (Ilmanhävikki on pieni)

Viitteet

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Health care textiles - Bacteria penetration - Wet".

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.



Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Care of Sweden and CuroCell are trademarks of Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2015. All rights reserved. Last update: 02/06/15.



Haltija Group Oy
09-612 2250 | asiakaspalvelu@haltija.fi | www.haltija.fi

Patjanvalitsin
- Ohjeet patjan valintaan:
www.careofsweden.com/mattress-selector

 care of sweden
Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, SE-514 23 Tranemo, Sweden
+46 (0)771 106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.com

