


CuroCell® AREA Zone

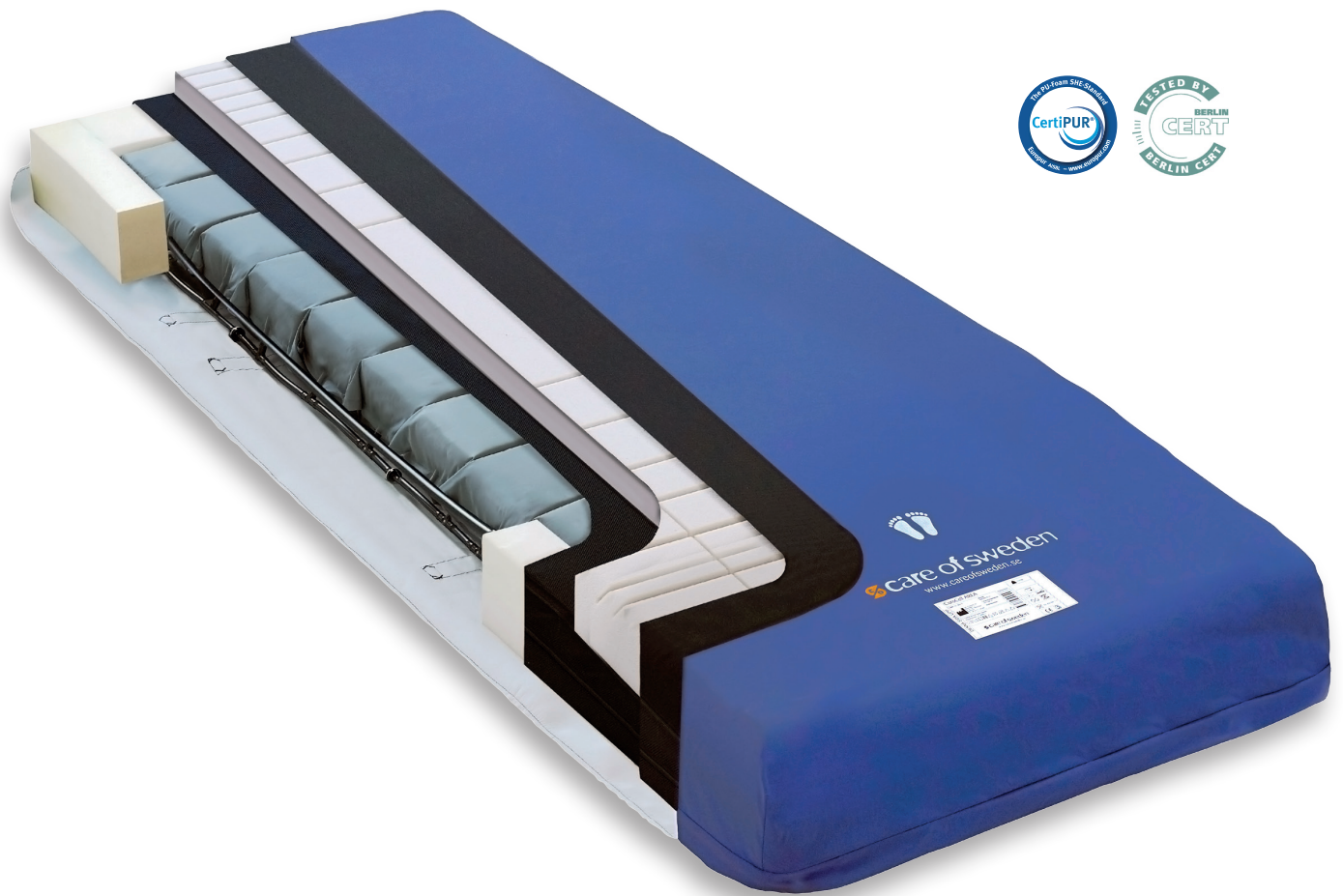

**Vaihtuvapaineinen patja
painehaavojen ennaltaehkaisuyn ja
hoitoon**

CuroCell® AREA Zone

CuroCell® AREA Zonea käytetään painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon riskiluokkaan 3⁽¹⁾asti. Suositeltu korkein käyttäjän paino on 230 kg⁽²⁾. Patjan ainutlaatuisessa rakenteessa yhdistyvät ilman ja vaahdon parhaat ominaisuudet tavalla, joka jakaa paineen tasaisesti ja on käyttäjälle miellyttävä. Patja on itsesäätyvä ja siinä ei ole sähköllä toimivaa kompressoria. Patja on tarkoitettu kaikkiin terveydenhoidon käyttöympäristöihin ja sitä on helppo käsitellä.

CuroCell® AREA Zone on kehitetty ehkäisemään painehaavojen syntyä. Patjassa on erinomaiset ominaisuudet liittyen paineeseen, kitkaan ja kosteuteen^(2,3), jotka ovat kolme tärkeää ominaisuutta painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa.

Care of Swedenin patjoissa on pestävä hygieniasuojus joka täyttää terveydenhuollon laatua, hygieniää sekä turvallisuutta koskevat vaatimukset⁽⁴⁾. Päällinen on valmistettu ajanmukaisista, kierrätettävistä materiaaleista ja on hengittävä⁽⁵⁾, mikä vähentää maseraation riskiä.

Tekniset tiedot

Patjatyyppi: Vaihtuvapaineinen patja
Korkeus: 18 cm
Käyttötarkoitus: Hoito ja ennaltaehkäisy mukaan lukien riskiluokkaa kolme⁽¹⁾ Suositeltu käyttäjän paino: 0-230 kg⁽²⁾
Paloturvallisuus: EN 597-1, -2
Takuu: 3 vuotta
Päällisen puhdistaminen: Pyyhitään kostealla pyyhkeellä ja puhdistusaineella. Desinfiointi alkoholipohjaisella desinfiointiaineella. Konepesu max 95 °C, rumpukuivaus.



Ominaisuudet

- Kitkaa vähentävä toiminto
- Patjan yläosassa aluejako
- Helppo käsitellä ja käyttää
- Joustava ja itsesäätyvä
- Kuljetuskahva
- Hygieniapäällisessä suljetut saumat
- Korkealaatuinen sisäsuojus
- Kantapääkevennys
- Ei tarvitse sähköä tai ulkopuolista pumppua
- Vahvistetut reunat
- Patjassa ja päällisessä painetut merkinnät helpottavat patjan tunnistamista

Patjan rakenteessa yhdistyvät ilma ja vahto. Patja sisältää yhdeksän kennoa, jotka on jaettu alueisiin, jotka sopeutuvat automaattisesti käyttäjän painon ja ruumiinrakenteen mukaan minimoiden pintapaineen.

Vaahtomuovi on kahdessa kerroksessa ja yläosa on vyöhykeprofiloitu. Erikoisrakenne vähentää siirtymisten aiheuttamaa kitkaa. Kantapääkevennys vähentää kantapäihin kohdistuvaa painetta.

CuroCell® AREA Zonessa on erinomaiset paineenjakautumisominaisuudet. Silä on arvioitu olevan "Korkea paineen lievittämiskyky"⁽²⁾. Tutkittaessa patjan paineenjakautumiskykyä (PAI) patjan päällä olijaan kohdistuvasta paineesta 100 % on raportoitu olevan vähemmän kuin 30 mmHg (kuorman ollessa 80 kg).

Koot

80/85/90/105/120x200/210 cm.
Mikäli tarvitset muita kokoja, ota yhteyttä myyjään.

Lisävarusteet

- Evakuointipäällinen
- Matalakitkainen päällinen
- Tukeva kuljetus- ja säilytyslaukku

Viitteet

- (1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014. Action plan against pressure ulcer, Care of Sweden in 2012.
- (2) Examination of the pressure relief capability, Berlincert 2012.
- (3) SS-EN ISO 15496: 2004, YOUR 53.122.
- (4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Medical textiles - Bacterial penetration - Wet".
- (5) SS-EN ISO 15496: 2004.



Lue huolellisesti käyttöohje ennen tuotteen käyttöä.

Care of Sweden and CuroCell are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2015. All rights reserved. Viimeisin päivitys: 13/08/15.



Skannaa QR koodi nähdäksesi esittelyvideon (englanniksi)



Haltija Group Oy
09-612 2250 | asiakaspalvelu@haltija.fi | www.haltija.fi

Patjanvalitsin

- Ohjeet patjan valintaan:
www.careofsweden.com/mattress-selector

Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, SE-514 23 Tranemo, Sweden
+46 (0)771 106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.com

