



LASTEN APUVÄLINEET

DYNAMIC PACER KÄVELYTELINE

Dynamic Pacer - vakaa ja turvallinen kävelyteline

Dynamic Pacer on monipuolinen ja helppokäyttöinen kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön. Kävely Dynamic Pacerilla on käyttäjälle turvallista ja miellyttävää. Dynamic Pacer-kävelytelineitä voidaan käyttää kasvat tai selkää menosuuntaan päin. Avustajat arvostavat kävelytelineen helppoja ja monipuolisia säätömahdollisuuksia. Kävelytelineeseen voidaan lisätä monia erilaisia lisävarusteita jokaisen kävelijän tarpeisiin.

Ylärunko saatavissa vakiona tai dynaamisella liikkeellä.

Monipuolinen ja säädettävä satula istuin antaa ihanteellisen tuen lantion ja helpottaa siirtymiä kävelytelineeseen.

Matkamittarin (lisävaruste) avulla on helppo mitata kävelymatkan pituutta ja seurata kävelyharjoittelun edistymistä.



Lisävarusteena saatavat käsi- ja kyynärnojat antavat kävelijälle lisätukea.

Ylärungossa kaasujousella toimiva korkeussäädin.


Vakaa mutta kevyt runko lisää turvallisuuden tunnetta ja helpottaa liikuttamista. Avonainen rungon muotoilu mahdollistaa optimaalisen liikelajuiden.

Seisontajarrut, pyöräjarru, takaisin pyörimisen esto sekä suuntalukitus ovat kaikki samassa pyörässä.

Miksi dynaaminen?

Kävely on monimutkainen toiminto, joka vaatii koko kehon, nivelten, lihasten ja hermojärjestelmän yhteistoimintaa. Kävelyn eri vaiheiden aikana lantio liikkuu normaalisti ylös- alas sekä sivusuunnassa. Dynamic Pacerin ainutlaatuinen ominaisuus, dynaaminen liike, ohjaa lantion liikettä kävelyn aikana. Dynaaminen liike helpottaa kehon painonsiirtoja ja askelten ottamista.

Dynamic Pacerin dynaaminen ylärunko (lisävaruste) joustaa liikkeen aikana pystysuunnassa ja liikkuu vaakasuunnassa ohjaten lantion liikettä. Liike voidaan lukita myös pois käytöstä.

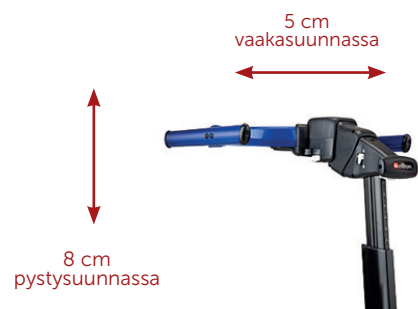



Monikäyttöinen ja säädettävä satulaistuin

Lantion hyvä asento on edellytys sujuvalle kävellylle. Säädettävällä satulaistuimella (Multi Position Saddle MPS) saadaan lantion asento tuettua haluttuun asentoon. Satulaistuin ohjaa kävellessä myös jalkoja pysymään erillään toisistaan. Säätämällä satulaistuimen korkeutta voidaan helpottaa myös siirtymätilanteita. Satulaistuinta voidaan käyttää käveltäessä kasvat tai selkä menosuuntaan ja se voidaan kääntää tilanteen mukaan.



Dynamic Pacerin alarunkovaihtoehdot:



Runko pikkupyörillä



Runko isoilla pyörillä



Runko juoksumatolle


DYNAMIC PACER KÄVELYTELINE



Siirtyminen istuma-asennosta Dynamic Pacer-kävelytelineeseen käy helposti.

Kävelijä siirtyy istumaan satulaistuimelle, jonka jälkeen kävelytelineen ylärunko nostetaan ylös halutulle korkeudelle. Lantion asento saadaan tuettua haluttuun asentoon säätämällä satulaistuimen korkeutta ja kulmaa.

DYNAMIC PACER-KÄVELYTELINEEN MITAT

Mitat (cm)		K630 Medium	K640 Large
 Kyynärpäämitta 81-119cm (kyynärpään etäisyys lattiasta seisoma-asennossa)		61-89 cm	81-119 cm
	Kokonaisleveys	Alarunko standard Alarunko isoilla pyörillä Alarunko juoksumatolle, kapea Alarunko juoksumatolle, leveä	66 cm 76 cm 89 cm 102 cm
Kokonaispituus	Alarunko standard Alarunko isoilla pyörillä Alarunko juoksumatolle	76 cm 94 cm 104 cm	91 cm 103 cm 104 cm
Runkokorkeus	Alarunko standard Alarunko isoilla pyörillä / juoksumatolle	53-69 cm 74-118 cm	74-99 cm 74-118 cm
Alarungon korkeus	Alarunko standard Alarunko isoilla pyörillä / juoksumatolle	38 cm 53 cm	41 cm 53 cm
Paino	Standard alarunko	6,4 kg	7 kg
	Alarunko isoilla pyörillä	7 kg	8,7 kg
	Alarunko juoksumatolle, kapea	12,5 kg	12,5 kg
	Alarunko juoksumatolle, leveä	12,7 kg	12,7 kg
	Ylärunko standard Ylärunko dynaaminen	3,4 kg 5,2 kg	4,4 kg 6,1 kg
Max. leveys	Alarunko juoksumatolle, kapea Alarunko juoksumatolle, leveä	74 cm 86 cm	74 cm 86 cm
	Max. korkeus	Alarunko juoksumatolle	28 cm
Max.käyttäjän paino		68 kg	91 kg



Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.



Haltija Group Oy
 Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa
 Puhelin: 09 612 2250
 asiakaspalvelu@haltija.fi
 www.haltija.fi