




KUNTOUTUS JA TERAPIAVÄLINEET

EASYSTAND EVOLV M / L / XT

Seisomateline

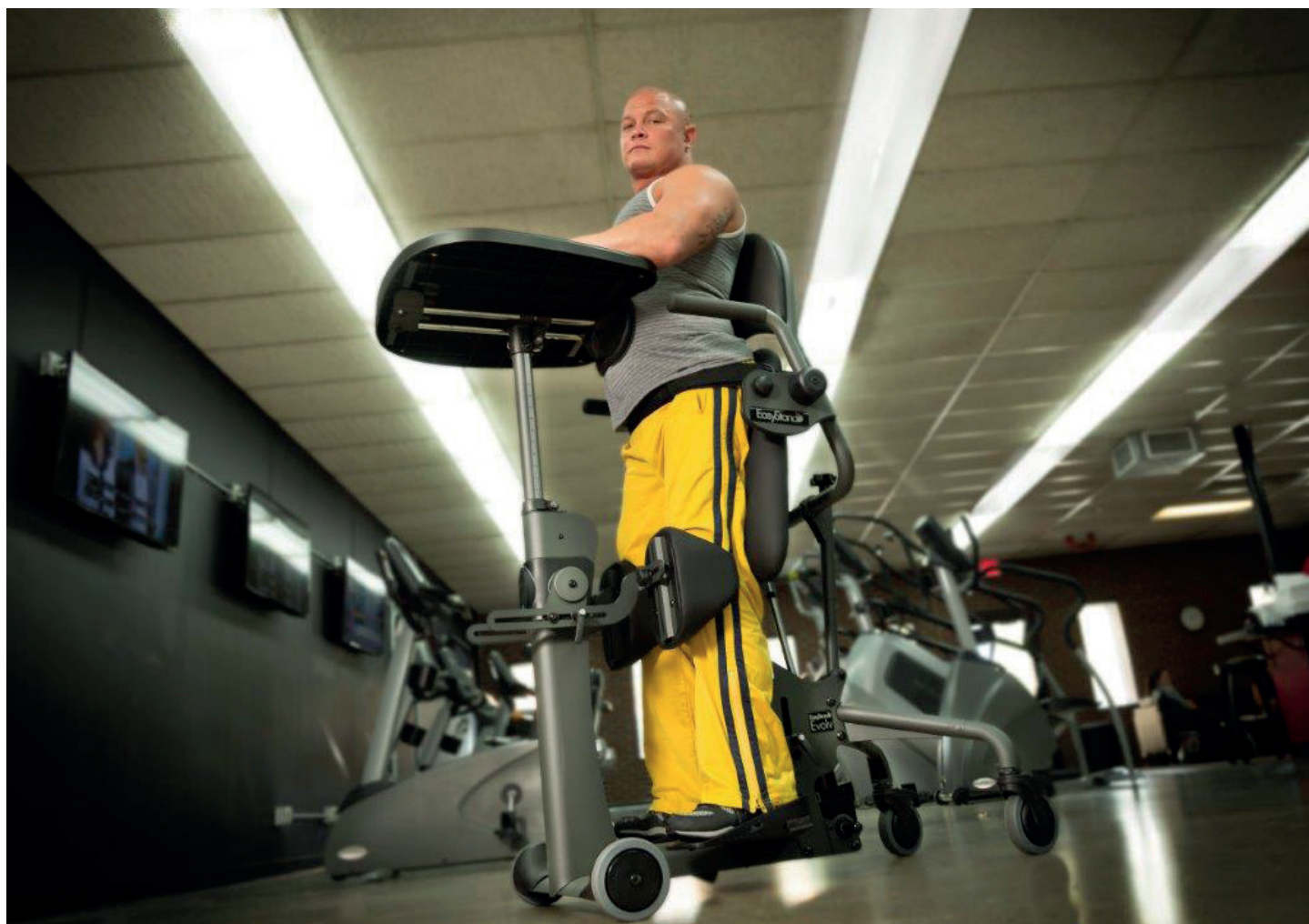

Istumasta seisomaan -luonnollinen liike

Easy Stand Evolv on seisomateline, jossa pystyyn nousu tapahtuu luonnollisen istumasta seisomaan liikkeen kautta. Easy Stand Evolvilla seisomaannousu on telineen käyttäjälle miellyttävää, turvallista ja hyvin tuettua.

Seisomatelineen istuinosa nousee pystyasentoon kahvaa eteenpäin pumpaamalla. Nousun voi lopettaa haluttuun asentoon jos esimerkiksi lonkissa on liikerajoituksia. Istuinosa laskeutuu alas viemällä kahvaa taaksepäin.

Helppo siirtyä

Easy Stand Evolv-seisomatelineeseen voi siirtyä istumaan suoraan pyörätuolista. Polvituen saa käännettyä pois siirtymisen tieltä. Sivulle kääntyvä Shadow tray-pöytä (lisävaruste) helpottaa siirtymisiä telineeseen. Rungon muotoilu mahdollistaa siirtymiset myös nostolaitteen avulla.

Helppo käyttää ja säätää

Evolv on helppo säätää käyttäjälle sopivaksi ilman työkaluja, joten se soveltuu hyvin myös laitospöytäkäyttöön.

Istuinsyvyyttä, säärimittaa ja jalkatukien asentoa voidaan säätää, samoin polvitukien sekä pöytälevyn korkeus ja etäisyys ovat helposti säädettävissä erikokoisille käyttäjille.

Evov seisomatelineen perusvarustus:

- Kaksi 5" lukittavaa takapyörää
- Kaksi 5" etupyörää
- Käsikäyttöinen hydraulinen pumppu
- Istuin
- Kääntyvä yksiosainen polvituki
- Monipuolisesti säädettävät jalkatuet (korkeus, kulma etäisyys)
- Rintakehätki
- Käsiinotat



Evolv perusvarustuksella

Kolme eri kokoa ja useita lisävarusteita

Easy Stand Evolv seisomatelineettä on saatavana kolmea eri kokoa. Evolv M (Medium) on tarkoitettu nuorille ja pienikokoisille aikuisille, Evolv L (Large) aikuisille, ja Evolv XT isokokoisille henkilöille.

EasyStand Evolviin on saatavilla paljon erilaisia lisävarusteita, joilla seisomatelineen saa helposti räätälöityä kullekin henkilölle sopivaksi.

Yleisimpiä lisävarusteita:

- **Uniikki Shadow Tray-pöytä antaa ihanteellisen tuen**
Shadow tray- pöytä ja sen muotoiltu rintakehätki tukevat seisijan asentoa asennon muuttuessa istuma-asennosta seisoma-asentoon. Pöytälevy on myös käytettävissä koko ajan asennon muuttuessa ilman, että sen asentoa täytyy säätää. Shadow tray-pöytä sopii hyvin käyttäjille, joilla on huono vartalon hallinta. Erityisesti tilanteissa, joissa käyttäjä ei esimerkiksi liikerajoitusten vuoksi pääse täysin pystyyn seisoma-asentoon, antaa Shadow tray-pöytä ihanteellisen tuen. Shadow tray-pöytä käännetään ylös sivulle siirryttäessä telineeseen. (Shadow tray-pöytälevyn kanssa on telineessä oltava matala tai korkea selkänoja. Ei kelattavan Mobile-option kanssa).
- **Erilliset polvituet**
Voidaan säätää erikseen korkeutta ja etäisyyttä. Polvituet saadaan käännettyä ylös pois siirtymisten tieltä.
- **Lantiotuet**
Tukevat lantia sivusuunnasta.
- **Ylävartalotuet** (käytetään selkänojan kanssa)
Tukevat ylävartaloa sivusuunnasta.
- **Selkänoja**
Selkänoja on saatavissa matalana ja korkeana sekä tasaisella että muotoilulla pehmusteella.
- **Kääntyvät etupyörät**
Kääntyvät etupyörät helpottavat telineen siirtelyä sekä siirtymistä telineeseen nostolaitteen avulla.



Shadow Tray-pöytä



Erilliset säädettävät polvituet



Lantiotuet



Ylävartalotuet ja muotoiltu korkea selkänoja



Korkea, tasainen selkänoja



Kääntyvät etupyörät

EASYSTAND EVOLV M / L / XT

Evolv-seisomateline on saatavissa myös sähkökäyttöisenä tai kelattavana Mobile-versiona.



Evolv sivulle kääntyvällä pöydällä (shadow tray), matalalla selkänojalla, rintakehävyöllä sekä erillisillä polvituilla



Evolv kelattavalla Mobile-optiolla ja matalalla selkäosalla.

Tekniset tiedot	Evolv M	Evolv L	Evolv XT
Maksimikäyttäjäpaino	90 kg	127 kg	159 kg
Käyttäjän pituus	122-168 cm	152-188 cm	183-208 cm
Säärimitta	26-46 cm	36-53 cm	43-58 cm
Istuinsyvyys	36-48 cm	46-58 cm	51-64 cm
Istuinkorkeus lattiasta	55 cm	55 cm	60 cm
Polvitukien syvyys	9-15 cm	9-15 cm	12-18 cm
Kokonaispaino	46 kg	47 kg	51 kg
Kokonaismitta (leveys x syvyys)	67x85 cm	67x85 cm	70x95 cm

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa
Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi
www.haltija.fi